


Προβλεπόμενη χρήση:

Η συσκευή τρυπήματος προορίζεται για χρήση με βελόνες για να πάρει το δείγμα αίματος από την άκρη του δακτύλου ή από εναλλακτικά σημεία.

Δομή του προϊόντος:

Η συσκευή τρυπήματος περιλαμβάνει ακόλουθα μέρη:

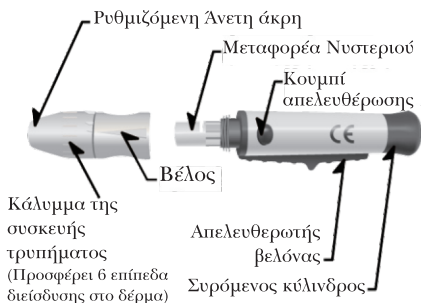

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Κρατήστε το στυλό τρυπήματος καθαρό.
2. Η συσκευή τρυπήματος είναι για χρήση για ένα άτομο μόνο.
3. Η βελόνα είναι για μία μόνο χρήση.
4. Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση της χρησιμοποιημένης βελόνας από τη συσκευή και κατά την απόρριψη των χρησιμοποιημένων βελόνων.
5. Η συσκευή τρυπήματος είναι σύμφωνη με MDD 93/42/EEC.

P.T. Hadjigeorgiou co Ltd

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ: P.T. Hadjigeorgiou co ltd
P.O.Box 53158-3301 Λεμεσός, Κύπρος
Tel: 00357-25 372425 Fax: +357-25 376400



SteriLance Medical (Suzhou) Inc
No. 68 LiTangHe Road, XiangCheng,
Suzhou City, China




Emergo Europe
Molenstraat 15 2513 BH The Hague,
The Netherlands



Οδηγίες χρήσης:

1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της συσκευής τρυπήματος. Τοποθετήστε μια βελόνα μέσα στην Μεταφορέα βελόνας


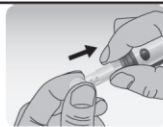


2. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της βελόνας τρυπήματος βελόνα να ξεχωρίσει από τη βελόνα.




3. Τοποθετήστε το κάλυμμα της συσκευής τρυπήματος και ρυθμίστε το βάθος της παρακέντησης στον επιθυμητό αριθμό.


Η ρυθμιζόμενη άνετη άκρη έχει 6 επίπεδα διείσδυσης του δέρματος. Για να επιλέξετε το επιθυμητό βάθος, περιστρέψτε την Ρυθμιζόμενη άνετη άκρη στην κατεύθυνση μέχρι το επίπεδο να είναι ευθυγραμμισμένο με το βέλος.

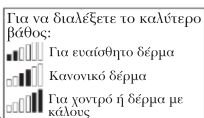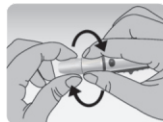

4. Τραβήξτε προς τα πίσω το συρόμενο δακτύλιο μέχρι να κάνει ένα κλικ, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή τρυπήματος είναι κλειδωμένη στη θέση του.

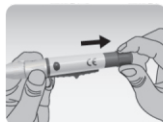

5. Τοποθετήστε το άκρο της συσκευής τρυπήματος έναντι του βραχίονα από οποίο το δείγμα αίματος είναι να λαμβάνονται. Εφαρμόστε πίεση και το δέρμα στο εσωτερικό του στόχου περιοχής θα αυξηθεί ελαφρά. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης για να τρυπήσει το δέρμα.

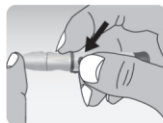

6. Αφαιρέστε την ρυθμιζόμενη άνετη άκρη όταν τελειώσετε. Βάλτε το προστατευτικό καπάκι πίσω στην εκτεθειμένη βελόνα της συσκευής.



7. Κατευθύνετε τη συσκευή τρυπήματος μακριά από εσάς και σύρετε τη βελόνα με τον απελευθερωτή βελόνας με μια κίνηση προς τα εμπρός, πετώντας τη βελόνα σε ένα εγκεκριμένο δοχείο.

